# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФИЗТЕХ-ШКОЛА РАДИОТЕХНИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

# Эффект Поккельса

Работу выполнил: Шурыгин Антон группа Б01-909

Долгопрудный, 2021

## Содержание

1	Исс	ледование интерференции рассеянного света	4
	1.1	Краткая теория	4
	1.2	Измерения	5
2		иенение характера поляризации света наличии внешнего поля	Q
	при	паличии внешнего поли	G
	2.1	Краткая теория	8
	2.2	Измерения	9
3	Выі	зод	L1

Цель работы: исследовать интерференцию рассеянного света, прошедшего кристалл; наблюдать изменение характера поляризации света при наложении на кристалл электрического поля.

Оборудование: гелий-неоновый лазер, поляризатор, кристалл ниобата лития  ${\rm LiNbO_3}$ , матовая пластинка, экран, источник высоковольтного переменного и постоянного напряжения, фотодиод, осциллограф, линейка.

Рассмотрим кристалл ниобата лития: его оптические свойства обладают симметрией вращения относительно выделенного направления - оптической оси Z. Для волны, распространяющейся вдоль Z, показатель преломления равен  $n_e$ , а для волны, перпендикулярной оптической оси, -  $n_o$ , причем  $n_o > n_e$ . Волну длины  $\lambda = 2\pi/k$ , проходящую под углом  $\theta$  к оси Z в кристалле, принято раскладывать на обыкновенную и необыкновенную. Для вектора напряженности обыкновенной волны верно:  $\overrightarrow{E_o} \perp (\overrightarrow{k}, \overrightarrow{Z})$ , - и показатель преломления равен  $n_o$ . Для вектора напряженности необыкновенной:  $\overrightarrow{E_e} \in (\overrightarrow{k}, \overrightarrow{Z})$ , - и показатель преломления  $n_2$  зависит от  $\theta$  по закону:

$$\frac{1}{n_2^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_0^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}$$

Разность хода обыкновенной и необыкновенной волн при прохождении кристалла длиной l составляет:

$$\Delta = kl(n_0 - n_2) = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l(n_0 - n_2)$$

C учетом зависимости  $n_2(\theta)$  для малых углов  $\theta$  в приближении  $n_o\approx n_e\colon$ 

$$\Delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l(n_o - n_e)\theta^2 \tag{1}$$

Направления постоянной разности фаз задают косинусы  $\cos \theta$ , следовательно, интерференционная картина являет концентрические окружности.

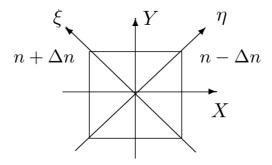


Рис. 1 Эффект Поккельса: главные направления при наложении электрического поля

Поместим кристалл ниобата лития в постоянное электрическое поле  $E_{\mathfrak{el}}$ , направленное по оси X, перпендикулярной оптической оси Z. В плоскости  $(\overrightarrow{X},\overrightarrow{Y})$  возникают быстрая и медленная оси под углами  $45^\circ$  к X, Y, соответствующие показателям преломления  $(\mathfrak{n}_o-\Delta\mathfrak{n})$  и  $(\mathfrak{n}_o+\Delta\mathfrak{n})$ , здесь  $\Delta\mathfrak{n}=A\cdot E_{\mathfrak{el}}$ , A - константа, зависящая от свойств материала. В этом и заключается эффект Поккельса.

Появление главных направлений  $\xi$  и  $\eta$  иллюстрирует рисунок 1.

### Исследование интерференции рассеянного света

#### 1.1 Краткая теория

Схема наблюдения интерференционной картины приведена на рисунке 2. Свет лазера, поляризованный в вертикальной плоскости, рассеивается на матовой пластинке и проходит через двоякопреломляющий кристалл. На выходе из кристалла стоит поляроид. Параметры установки: размеры кристалла  $3\times3\times26$  мм, длина волны гелий-неонового лазера  $\lambda=0,63$  мкм, показатель преломления  $n_o=2,29$ , расстояние до экрана от центра кристалла  $L=(76\pm1)$  см.

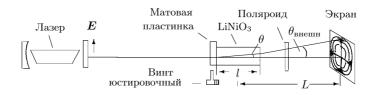


Рис. 2 Схема наблюдения интерференционной картины

Интерференционная картина, создаваемая обыкновенной и необыкновенной волнами, наблюдается в скрещенной поляризации. Для луча, идущего вдоль оптической оси Z, верно:  $n_o=n_e$ ; его поляризация не изменяется в кристалле, луч не проходит через анализатор, и в центре интерференционной картины находится темное пятно. Следующий минимум интенсивности соответствует сдвигу фаз между волнами на  $2\pi$ , поэтому условие на m-ое темное кольцо запишется с использованием формулы (1) в виде:

$$\Delta = 2\pi m \leftrightarrow \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l(n_o - n_e)\theta_m^2 = 2\pi m \leftrightarrow \theta_m^2 = \frac{m\lambda}{l(n_o - n_e)}$$

Здесь  $l=26\ \mathrm{mm}$  - длина кристалла вдоль оптической оси.

По закону Снеллиуса, угол преломления на внешней границе кристалла:  $\theta_{ex}=n_o\theta$ . Тогда для радиуса m-ого темного кольца  $r_m$  верно:

$$r_{m}^{2} = \frac{\lambda}{l} \frac{(n_{o}L)^{2}}{(n_{o} - n_{e})} \cdot m \tag{2}$$

#### 1.2 Измерения

Соберем установку по схеме на рисунке 2, предварительно убедившись в вертикальной поляризации лазера. Лазер установим так, чтобы в отсутствии кристалла излучение через него не проходило. Оптимальное расстояние L от экрана до центра кристалла определим экспериментально, центр интерференционной картины совместим с изображением луча в отсутствие матовой пластинки. При повороте анализатора на  $90^{\circ}$  градусов от исходного положения картинка на экране меняется на негативную, что соответствует смене разрешенной выходной поляризации и, следовательно, условиям на темные кольца.

Снимем зависимость радиусов темных концентрических колец от номера максимума  $r_m(m)$ . Для большей точности измерений отметим положения колец на экране вдоль прямой карандашом. Погрешность величины  $r_m$  примем равной 0,2 см из-за расплывчатости картинки. Результаты измерений занесены в таблицу 1.

m	1	2	3	4	5	6	7	8
r <sub>m</sub> , cm	3.1	4.3	5.3	6.2	7.0	7.5	8.0	8.6
$r_{\rm m}^2$ , cm <sup>2</sup>	9.61	18.49	28.09	38.44	49.00	56.25	64.00	73.69
$\Delta r_{\rm m}^2$ , cm <sup>2</sup>	0.58	1,02	1.50	2,02	2.55	2.80	2.90	3.20

Таблица 1 Измерение квадратичной зависимости радиуса темного кольца интерференционной картины от номера минимума

На основе таблицы 1 построен график зависимости квадрата радиуса кольца от номера соответствующего минимума  $r_{\mathfrak{m}}^2(\mathfrak{m})$ , изображенный на рисунке. Погрешность  $r_{\mathfrak{m}}^2$  рассчитана по формуле произведения погрешностей.

Экспериментальные точки хорошо на прямую  $r_m^2=bm+a$ , что соответствует теоретической зависимости (2). Проведем ее методом наименьших квадратов, воспользовавшись привычными формулами для коэффициентов прямой и их погрешностей.

Получили прямую в пределах погрешности, задаваемую уравнением:

$$y = 9.20x + 0.81$$

Для коэффициента наклона имеем:

$$b = \frac{\lambda}{l} \frac{(n_o L)^2}{(n_o - n_e)} = (9.2 \pm 0.2) \text{ cm}^2$$

Выразим двулучепреломление ниобата лития  $n_o-n_e$ :

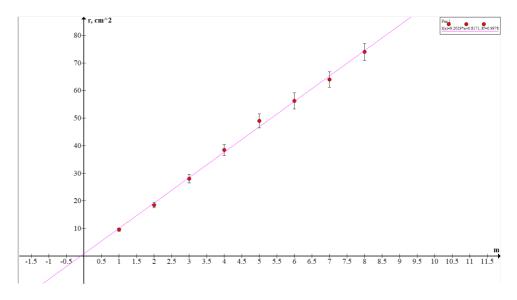


Рис. 3 График зависимости номера кольца от радиуса в квадрате

$$n_o - n_e = \frac{\lambda}{l} \frac{(n_o L)^2}{b} = 113.25 \cdot 10^{-3}$$

Для вычисления использовались параметры установки, описанные в начале раздела. Считаем, что вклад в погрешность дают непосредственно измеренные величины: длина от центра кристалла до экрана L и коэффициент b.

$$\sigma_{n_o-n_e} = (n_o-n_e) \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2} = 2.55 \cdot 10^{-3}$$

$$n_o - n_e = (113.25 \pm 2.55) \cdot 10^{-3}$$

## 2 Изменение характера поляризации света при наличии внешнего поля

#### 2.1 Краткая теория

При наложении электрического поля в кристалле возникают быстрая ось  $\xi$  и медленная ось  $\eta$ , изображенные на рисунке 1 .Разложим вектор напряженности волны по ним. После прохождения кристалла разность фаз между  $E_{\eta}$  и  $E_{\xi}$  составит:

$$\Delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2l\Delta n = \frac{4\pi}{\lambda} \frac{l}{d} AU$$

, где  $U=E_{e1}d$  - напряжение на кристалле, d=3 мм - его поперечный размер, l=26 мм - длина пути луча. Поляроид пропускает горизонтальную составляющую волны. Значит, выходная напряженность складывается из проекций  $E_{\eta}$  и  $E_{\xi}$  на ось X:

$$E = \frac{E_0}{2} \cdot e^{i(\omega t - kl)} (e^{i\Delta/2} - e^{i\Delta/2}) = \frac{E_0}{2} \cdot e^{i(\omega t - kl + \pi/2)} \sin \frac{\Delta}{2}$$

Здесь  $E_0$  - амплитуда входной волны.

Учтем так же, что в оптике спрведливо выражение для интенсивности:

$$I_{\text{out}} \equiv E \cdot E^* = E^2 \sin(\frac{\Delta}{2})^2$$

Отсюда интенсивность выходной волны:

$$I = I_0 \sin^2 \frac{\Delta}{2} = I_0 \sin^2 \left( \frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}} \right) \tag{3}$$

Здесь введено полуволновое напряжение  $U_{\lambda/2}=\frac{\lambda}{4A}\frac{d}{l}$ , соответствующее максимальной интенсивности на выходе.

При параллельных поляризациях лазера и анализатора получаем следующую зависимость  $\mathrm{I}(\mathsf{U})$ :

$$I = I_0 \cos^2 \left( \frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}} \right) \tag{4}$$

Полная схема установки, включающая блок питания, фотодиод и осциллограф, используемые в этой части работы, показана на рисунке 4.

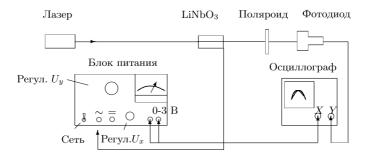


Рис. 4 Схема установки для изучения двулучепреломления в электрическом виде

#### 2.2 Измерения

Соберем схему как на рисунке 4 и подключим разъем блока питания на постоянное напряжение. Увеличивая напряжение с нулевого значения, проследим за изменением яркости пятна на экране.

Для скрещенных поляризаций при напряжениях  $U=(2k-1)U_{\lambda/2}$  наблюдается максимум интенсивности, при  $U=2kU_{\lambda/2}$  - минимум, здесь k - натуральное число. Для параллельных поляризаций ситуация противоположная.

Напряжения, соответствующие последовательным экстремумам интенсивности для разных поляризаций, содержатся в таблице 2. В 100 делениях шкалы блока питания  $1.5~\mathrm{kB}$ . Погрешность измерения напряжения примем равной 1 делению, или  $15~\mathrm{B}$ .

	Скрещенная поляризации
$U_{\lambda/2}$ , дел	28
$U_{\lambda/2}$ , B	420
$2U_{\lambda/2}=U_{\lambda}$ , дел	56
$2U_{\lambda/2}=U_{\lambda}$ , B	840
$3U_{\lambda/2}=U_{3\lambda/2}$ , дел	86
$3U_{\lambda/2}=U_{3\lambda/2}, B$	1290

Таблица 2 Измерение последовательных напряжений, соответствующих минимумам/максимумам интенсивности для скрещенной поляризации

При напряжении  $U_{\lambda/4}$  интенсивности при скрещенной и параллельной поляризациях совпадают. Выставим экспериментальное значение напряжения  $U_{\lambda/4}=U_{\lambda/2}/2\approx 210$  В. При вращении анализатора интенсивность наблюдаемого пятна практически не меняется, что свидетельствует о круговой поляризации и подтверждает правильность расчетов.

Заменим в схеме, изображенной на рисунке 4, экран фотодиодом, подключим его к Y-входу осциллографа. На X-вход подадим переменное напряжение с блока питания. В режиме DUAL на экране осциллографа получаются фигуры  $\lambda$ иссажу, отвечающие зависимости I(U). Она задается формулой (3) для скрещенных поляризаций и имеет вид синусоиды, взятой на симметричном отрезке, или формулой (4) для параллельных поляризаций и представляет собой косинусоиду. Таким образом, фигуры  $\lambda$ иссажу для разных поляризаций при одинаковом значении амплитуды напряжения  $\lambda$ 0 отличаются по фазе на  $\pi/2$ .

Определим полуволновое напряжение, измерив разность показаний между последовательными фигурами Лиссажу на экране, соответствующие экстремумам сигнала:

$$U_{\lambda/2}\approx 29$$
 дел  $=435$  В

Фотографии наблюдаемых фигур Лиссажу для напряжений, кратным полуволновому, при скрещенных поляризациях представлены на рисунке ??.

#### 3 Вывод

В работе изучена интерференция рассеянного света, прошедшего кристалл ниобата лития: получена зависимость квадрата радиуса темного кольца интерференционной картины от номера минимума  $r_{\rm m}^2(m)$ , с хорошей точностью являющаяся линейной ( $\sigma_{\rm r_{\rm m}^2(m)}\approx 2~\%$ ), что согласуется с теорией при малых углах отклонения луча от оптической оси кристалла и близких значениях показателей преломления для обыкновенной и необыкновенной волн. Полученное двулучепреломление кристалла  $n_{\rm o}-n_{\rm e}$  составляет  $112\cdot 10^{-3}$ . Табличное значение для лития  $n_{\rm o}-n_{\rm e}\approx 83\cdot 10^{-2}$ .

Рассмотрен эффект Поккельса: несколькими способами определено полуволновое напряжение, оно совпадает в пределах погрешности и равно  $U_{\lambda/2}\approx 420$  В. Получены фигуры Лиссажу, отражающие зависимость интенсивности выходного сигнала от подаваемой амплитуды напряжения I(U) при скрещенных поляризациях. Картинки для поляризаций скрещенной поляризации приведены ниже.

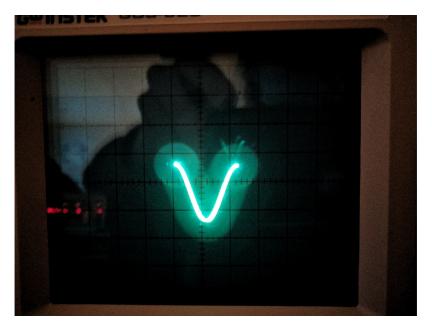


Рис. 5 Фигуры Лиссажу для скрещенных поляризаций при различных амплитудах напряжения U: (a) U =  $U_{\lambda/2}$ 

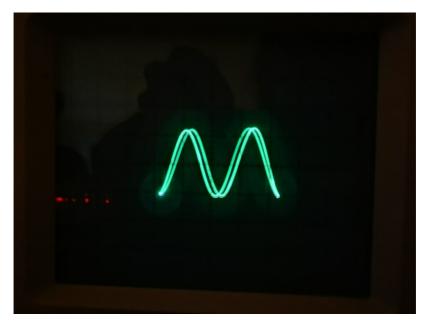


Рис. 6 Фигуры Лиссажу для скрещенных поляризаций при различных амплитудах напряжения U: (b) U = U $_{\lambda}$ 

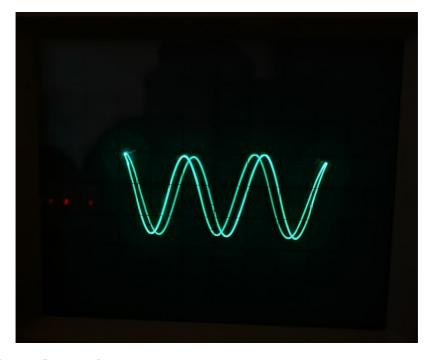


Рис. 7 Фигуры Лиссажу для скрещенных поляризаций при различных амплитудах напряжения (c)  $U=U_{3\lambda/2}$